


### Kit Blood MagnétaPure : 1 kit ~ 11 plaques



- Annoter un trait sur la boîte de kit pour chaque plaque extraite
- Re suspendre toutes les pk du kit
- pk additionnelle re suspendue dans 2,5 ml de PB (environ 1 bouteille)
- MBL2 additionnel (si besoin)
- Possibilité de faire une 12<sup>ème</sup> plaque : vérifier le volume de MBL3 restant (minimum 77 ml pour 1 plaque)

#### Tri des plaques usagées :

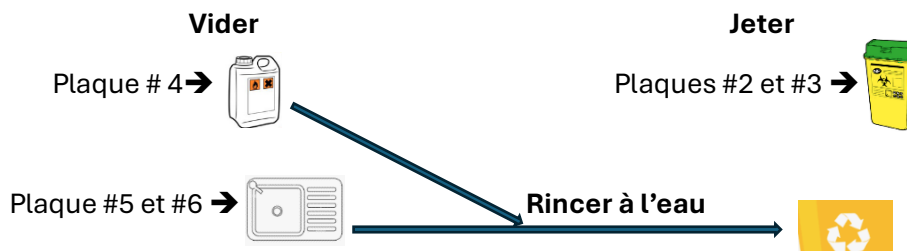

### Kit Tissue MagnétaPure : 1 kit ~ 62 plaques

- Annoter le numéro de lot sur chaque bouteille du kit
- Re suspendre toutes les pk du kit
- pk additionnelle re suspendue dans 1,8 ml de PB (environ 17 bouteilles)
- MB2 additionnel (environ 6 bouteilles)
- Réactifs limitants : MB3/MB4 (minimum 30 ml pour 1 plaque)

#### Tri des plaques usagées :

